

# Philco

## Skin Care

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
ULTRASONIC BEAUTY PTE02



# Philco

Skin Care

# Philco

## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial

**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**



**LEIA O MANUAL**

## RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## CUIDADOS DIÁRIOS

- Este produto é usado principalmente para cuidar da pele do rosto.
- Se algo incomum ocorrer com o aparelho ou com a pele durante o uso, interrompa o uso imediatamente.
- Caso o produto não esteja funcionando corretamente, dirija-se a uma Assistência Técnica Autorizada.
- O uso do produto com defeito ou mal uso do aparelho pode causar danos a sua pele, cuidado.
- O uso do produto com defeito ou mal uso do mesmo pode causar danos irreversíveis ao produto.
- Certifique-se de usar um carregador de saída 5V / 1A DC, que está em conformidade com os padrões nacionais ao carregar este produto, e conecte o carregador à uma tomada elétrica longe de fontes de calor ou fogo para evitar incêndio.
- Como este produto possui uma bateria recarregável embutida, não coloque o produto no fogo ou perto dele e evite usá-lo em alta temperatu-

ra e ambientes superaquecidos, pois pode causar defeitos ao produto, ou ou até mesmo incêndio.

- A bateria deste produto é uma bateria dedicada. Se você continuar a usá-la depois da vida útil já ultrapassada, uma reação química pode ser gerada dentro da bateria, levando à expansão e deformação. Além disso, o produto pode ser deformado em contato com altas temperaturas, quedas ou acidentes domésticos. Se o produto estiver deformado ou danificado, não o use para evitar o risco de choque elétrico e incêndio.
- Não use um carregador quebrado e também não perca o conector USB, que acompanha o produto pois o soquete mal encaixado no produto pode provocar choque elétrico, curto-circuito, incêndio entre outras anomalias.
- Para evitar acidentes, o carregamento do produto deve ser feito de acordo com as instruções deste manual e o carregador deve atender aos requisitos citados anteriormente.

## CUIDADOS DIÁRIOS


- Não utilizar este produto para outra finalidade não incluída no escopo deste manual para evitar mau funcionamento ou incêndio.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Coloque o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Interrompa imediatamente o uso do produto em caso de aquecimento anormal e o desconecte da tomada /energia.
- Não use o produto enquanto o mesmo estiver carregando.
- Esse produto não deve ser usado por pessoas com tumor maligno, com implantes metálicos no corpo como marca-passo cardíaco, mulheres grávidas, mulheres em período menstrual e pessoas que sofrem de doenças cardíacas.
- A função ultrassônica é estritamente proibida para olhos, laringe, ouvidos e assim por diante.
- Certifique-se de que a aparência do produto não está irregular e a luz indicadora de inicialização e a temperatura estão normais antes de usar este produto.
- Certifique-se de seguir as instruções do manual do produto ao usá-lo.
- Não desmonte ou modifique o produto por conta própria para evitar mau funcionamento.
- Evite deixar cair e bater no produto para evitar falhas.
- O produto deve ser limpo após o uso para evitar o acúmulo de resíduos.

## SIMBOLOS



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

## COMPONENTES

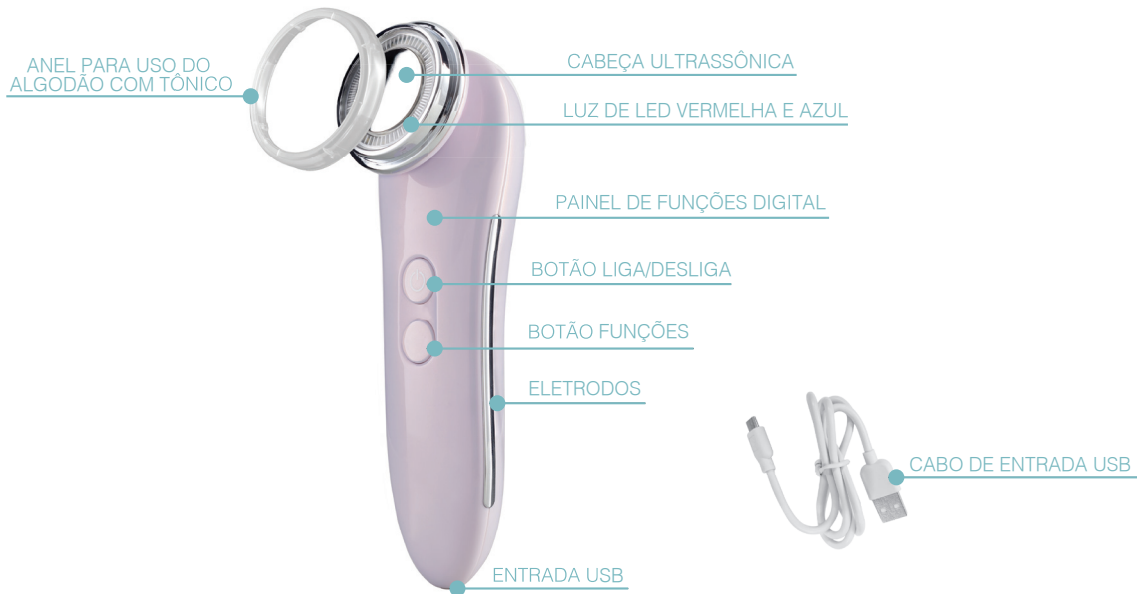

## CARREGANDO A BATERIA

1. Carregue o produto antes de usá-lo pela primeira vez. Certifique-se de usar o carregador que atende aos requisitos citados em CUIDADOS DIÁRIOS para carregar. Se você for usá-lo em outro país, estado ou cidade, primeiro veja se a voltagem local e o carregador são adequados para este produto.
2. Siga essa sequência para iniciar o carregamento: desligue o produto, conecte o carregador com o cabo USB que acompanha o produto, insira o plugue do carregador na tomada elétrica e conecte o produto ao cabo de carregamento USB.
3. O painel digital do produto mostrará uma luz pulsante, indicando que o carregamento está em andamento. Depois que o carregamento for concluído, todas as luzes ficarão acesas. Neste ponto, desconecte o produto do cabo USB e desconecte o carregador da tomada. É um fenômeno normal se o produto e o carregador estiverem um pouco quentes.
4. Demora cerca de 2 horas para carregar totalmente o produto usando o carregador que atende aos requisitos. O tempo pode variar dependendo de algumas circunstâncias específicas.

### Cuidados ao carregar o aparelho

- Não insira e retire o cabo de alimentação com as mãos molhadas (pode causar choque elétrico e curto-circuito).
- Não use em locais onde a água é acessível, como em uma banheira ou em um local úmido, para evitar o mau funcionamento ou curto-circuito.
- Não deixar o produto carregando ao sair de casa, o carregamento deve

ser supervisionado.

- Desligue e retire o plugue da tomada elétrica imediatamente quando ocorrerem anormalidades durante o carregamento.
- Pare de carregar imediatamente seu aparelho se o cabo USB estiver danificado.
- Não dobre, estique, torça, pressione ou enrole o cabo do carregador.

## INSTRUÇÕES DE USO

Este produto tem seis modos de operação: Limpeza, Nutrição, Lifting, Fóton, Massagem e Relaxamento.

Pressione e segure o botão liga / desliga para ligar ou desligar e para mudar de nível apenas pressione.

Pressione o botão MODO para mudar de função. Exemplo: de Higienizar para Massagem, pressionar liga / desliga para confirmar o nível.

Cada função apresenta 3 níveis de intensidade:

**Nível 1:** luzes H F


**Nível 2:** luzes H N  
F M

**Nível 3:** luzes H N L  
F M R

**Modo Higienizar:** a luz indicadora "H" acenderá, neste momento a vibração sônica, a compressa quente e exportação de íons se inicia em sincronia para limpar profundamente. Neste modo, use o anel de

## OPERAÇÃO

retenção de algodão cosmético para colocar uma esfera de algodão entre a cabeça e o anel e aplique um tônico de limpeza facial.

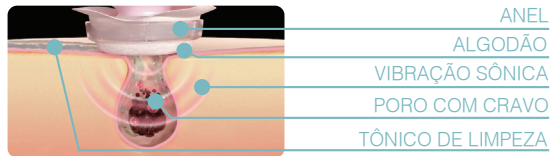

**Modo de Nutrição:** a luz indicadora "N" acenderá, neste momento a vibração sônica, compressa quente, ultra-som e a eletroporação serão sincronizados. Esse modo é usado após a aplicação de produtos para a pele.

**Modo de Lifting:** a luz indicadora "L" acenderá, neste momento, a vibração sônica, compressa quente, levantamento ultrassônico, massagem em micro-correntes serão sincronizados. Este modo pode ser usado para cuidados com o rosto à noite, afim de elevar as laterais do rosto e promover o formato V facial, ativar o colágeno e suavizar rugas mediante a aplicação de cremes de tratamento.

**Modo de Fóton:** a luz indicadora "F" acenderá, neste momento se inicia a vibração sônica e as luzes de LED vermelha e azul se alternarão

sincronizadamente. Essa função remete a fototerapia que utiliza luzes para auxiliar no rejuvenescimento da pele mediante a aplicação de cremes para tratamento, controle de oleosidade e hidratação. Recomendada-se apenas para uso noturno.



**Modo de Massagem:** a luz indicadora "M" acenderá, neste momento, a vibração sônica, a compressa quente e a luz de LED vermelha estarão sincronizadas. A luz vermelha promove a melhoria da circulação sanguínea auxiliando no relaxamento da pele.

**Modo Relaxamento:** a luz indicadora "R" acenderá, neste momento, a vibração sônica, a compressa quente e a luz LED azul estarão sincronizadas. Promove uma massagem, suave para o relaxamento da pele.



As funções acima devem ser utilizadas juntamente com cosméticos de tratamento. O uso isolado do aparelho sem a aplicação de cosméticos de tratamento podem causar danos a pele.



## INSTRUÇÕES DE USO

**Iniciar e Pausar:** o produto possui interruptor de contato inteligente. Quando o eletrodo é segurado e a cabeça do produto toca a pele, a função é ativada. Quando a cabeça do produto sai da pele, ou as mãos não tocam os eletrodos a função é suspensa.



## DICAS DE USO

- Escolha o modo e nível corretos de acordo com a condição da sua pele e hábitos de cuidados.
- Não use este aparelho demasiadamente. O uso demasiado pode afetar a saúde da pele.
- Recomenda-se que o modo limpeza seja realizado a cada dois ou três dias. Os demais modos podem ser administrados de acordo com os seus hábitos de cuidados com a pele e podem ser usados todos os dias.

- Recomenda-se o uso do aparelho por 3 a 5 minutos por dia, de preferência não mais do que 8 minutos.

### Qual o efeito desse produto na pele?

O tratamento de limpeza deste produto conta com a vibração sônica e compressa quente para abrir os poros, nesse modo, o algodão e o tônico são usados para limpar os poros pela exportação de íons. O tratamento de nutrição faz com que os poros relaxem e se abram sob a ação da vibração sônica e compressa quente, e os efeitos duplos do ultrassom e da eletroporação podem auxiliar na absorção dos produtos para a pele. O lifting oferece a sincronização da massagem sônica, compressa quente, levantamento ultrassônico e levantamento de micro-corrente EMS, que ajudam a absorver melhor os produtos de cuidados da pele dando um efeito de lifting. O modo Fóton causa principalmente o rejuvenescimento de fótons mediante o uso de cremes de tratamento, os efeitos de calmante e massagem ajudam a acalmar e relaxar a pele.

### Esse produto é à prova d'água?

A cabeça do produto é à prova d'água, mas o corpo não é à prova d'água. Não pode ser lavado durante o uso e só pode ser limpo com guardanapo de papel ou algodão.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Guardar o aparelho na caixa quando não estiver usando.
- Não enrolar o cabo USB em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre limpar a cabeça e remover os cosméticos depois de usar.
- Limpar o corpo do produto usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Não utilizar produtos abrasivos na limpeza do aparelho, pois pode causar danos irreversíveis a este.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho.
- Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.



**ABRASIVOS**



## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
  - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
  - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
  - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**Philco**

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC

CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ

07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

A close-up portrait of a woman's face, focusing on her eyes and skin. She has light blue eyes and is looking directly at the camera. Her hand is visible near her chin. The background is a solid teal color.

**Philco**  
www.philco.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOS PHILCO (47) 3431-0499

10/20 4250-09-05 732161 056333002 Rev.0